

十光停留
+
倍感年輕



除皺單極電波 / 400W

十倍電波

10 THERMA

—— 僅供內部教育訓練使用 ——

TEN^{TECH}

新一代容積式加熱 單極電波



大面積高成效

5cm² 提升25%，熱能堆疊更全面



七段冷卻更止痛

冷卻技術採 2-3-2 之 7 段式
緩解痛感再升級



不鎖時更彈性

單次、分次治療組合彈性不受限



測阻抗更精準

確保療效、安全不遺餘力



多尺寸更完整

眼：0.25cm²

臉：4cm²

臉⁺：5cm²

身體：20cm²




均勻熱能



壓力偵測



溫度感測

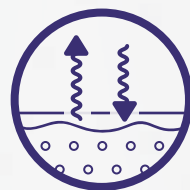

電阻感知



連續擊發



垂直震動

多元高效能探頭 完美選擇

亮眼探頭 0.25 cm²

300 REPs
600 REPs



緊膚探頭 4 cm²

300 REPs
600 REPs
900 REPs






緊膚探頭 PLUS 5 cm²

300 REPs
600 REPs
900 REPs




身體探頭 20 cm²

500 REPs
1000 REPs

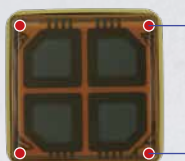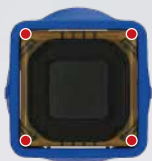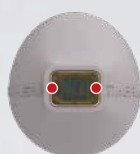

溫度感測器
增加療程安全性

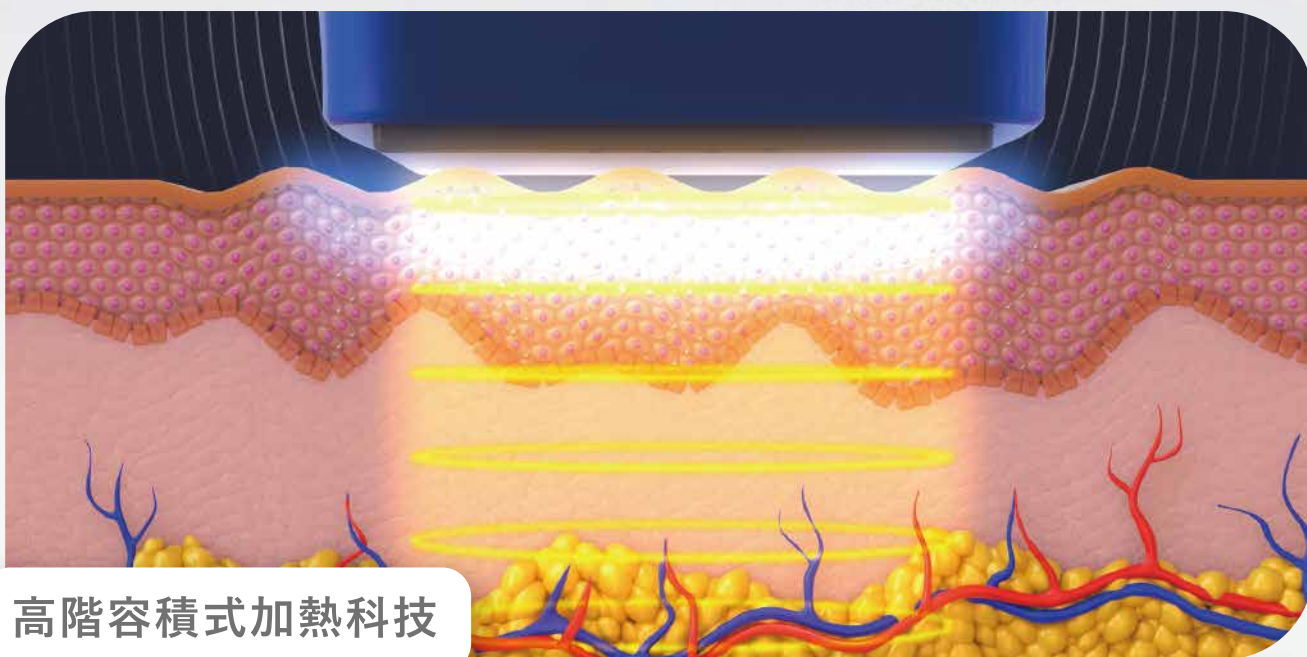

高階容積式加熱科技


十倍電波為嶄新的單極電波設備，不僅提供容積式加熱作用將熱量安全地傳遞至真皮層，同時採用7段式冷噴科技及6段脈衝輸出，大幅保護表皮與降低不適感，使單極電波的整體治療體驗更優化，持續提升膠原蛋白更新，改善皮膚彈性和皺紋。

新一代冷卻系統


7段冷卻分階釋放

S.T.C


Smart Temperature Cooling

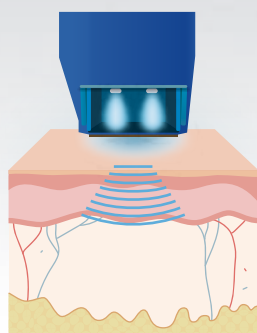

預先冷卻x2

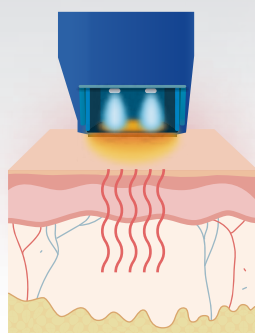

電波+冷卻x3

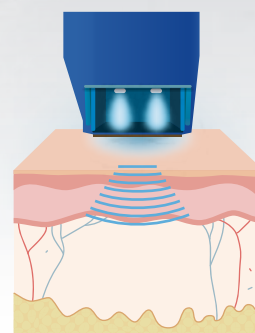


鎮靜冷卻x2



七段冷卻脈衝 + 六段能量分次輸出

每發能量輸出時，依序分段給予六次能量，不僅大幅提升舒適度，同時搭配人性化冷卻脈衝分配，可達到安全與有效的完美治療

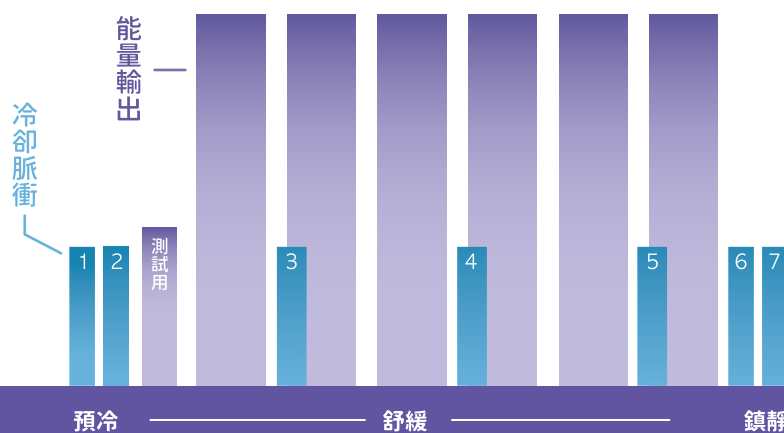

能量與冷卻相互組合
再創單極電波卓越成效

療效臨床實證

名稱：十蓓電波和他牌測試所得之安全性和有效性臨床對比研究

Comparative preclinical study on the safety and efficacy of 10THERMA and T* on Micropig

研究機構：Gachon University Gil Hospital, Department of Dermatology

(韓國嘉泉大吉醫院皮膚科)


時間：2021. Jun 16th ~ 2021. Sep 15th

成果：根據研究結果，十蓓電波和他牌被認為具有相似的功效和安全性。

Based on the results of studies in pig skin, having similar properties to human skin, 10THERMA and T* is considered to have similar efficacy and safety.

結締組織染色對照


根據本次測試中染色顯影的結果，與術前相比，術後第 30 天十蓓電波的膠原增生面積從 45% 增加到 60%，而他牌的膠原面積從 46% 增加到 57%。

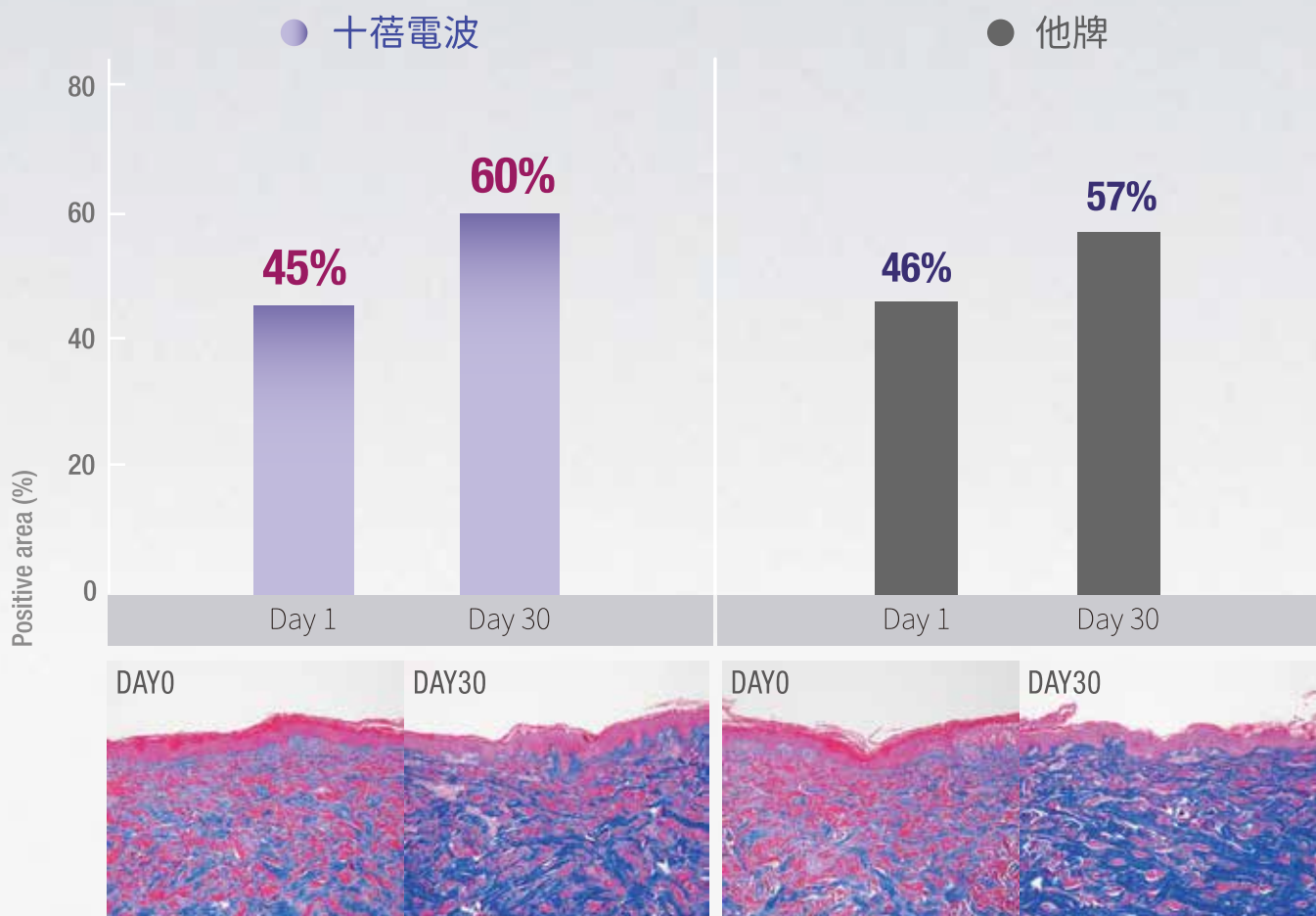

治療成效

BEFORE

AFTER

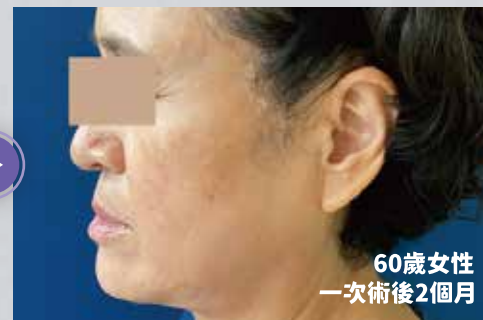



	十倍電波 10THERMA	他牌1 Ther.	他牌2 Olig.
尺寸	0.25cm ² 4cm ² 5cm² 20cm ²	0.25cm ² 3cm ² 4cm ² 16cm ²	0.25cm ² 4cm ²
冷卻脈衝數	7	6	4
冷卻級數	可調	X	可調
探頭時效	無限制	3小時	無限制
能量脈衝數	6次	5次	5次
最大功率	400W	400W	78W
電阻偵測	V	V	X

TFDA	皺紋、細紋
頻率(MHz)	6.78
功率(W)	400
電阻(Ω)	75 ~ 400
探頭(cm²)	亮眼探頭 0.25
	緊膚探頭 4.0
	緊膚探頭PLUS 5.0
	身體探頭 20.0
尺寸(mm)	W:405
	L:560
	H:1245
重量(kg)	46
電源	AC 100V -240 V, 50/60Hz, 600VA

 <原廠規格>



台灣總代理 偉鉅股份有限公司

電話：(02) 2515 0218

地址：104台北市中山區民權東路三段35號8F-1